


BiteStrip™

Eldobható Éjszakai Fogszorítás Ellenőrző Eszköz

Megbízható éjszakai fogszorítás regisztrálás a rágiozмок valódi elektromiográfiás monitorozása révén - alvás közben.


A BiteStrip előnyei

- ▶ A páciens természetes otthoni alvási körülményei között történik a vizsgálat
- ▶ Könnyű használni, eldobható, a páciens alkalmazza
- ▶ Alacsony költségek
- ▶ Pontos eszköz, melynek mérései kiemelkedő korrelációt mutatnak az alváslaborok EMG vizsgálataival
- ▶ Kis méretű, ultrakönnyű, akár postán is feladhatja
- ▶ Azonnal működőképes, az eredmény a kijelzőn tartósan megmarad, nincs szükség kiegészítő berendezésekre

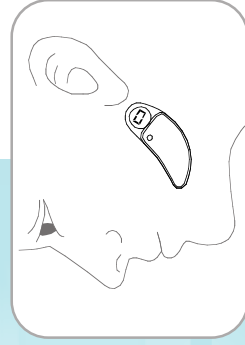

Electrochemical display

Indikátor fény

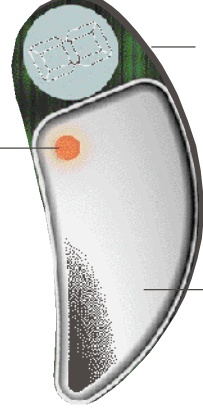

2 kontaktzselével előnedvesített elektróda

Elektrokémiai kijelző




0473

US és nemzetközi szabadalmak által védett

Ki tudja Ön mutatni a fogszorítást?

Pillantson a BiteStrip kijelzőjére és olvassa le az értékeket:

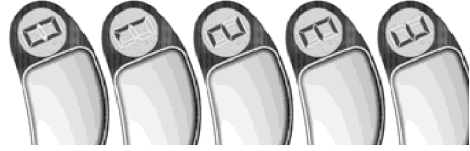

Nincs éjszakai bruxizmus: kevesebb mint 40 szorítás

Enyhe éjszakai bruxizmus: 40 - 74 közötti szorítás

Közepes erősségű éjszakai bruxizmus: 75 - 124 közötti szorítás

Súlyos éjszakai bruxizmus: a szorítások száma meghaladja a 125-öt

Hiba: a vizsgálat túl rövid ideig tartott vagy más problémák merültek fel

A BiteStrip-et arra tervezték hogy segítsen Önnek az éjszakai fogszorítás kimutatásában és ellenőrzésében. A BiteStrip egyszerűhasználatos érzékelők a legegyszerűbb, költségkímélő és pontos módszert kínálják Önnek az éjszakai fogszorítás kimutatásában. A BiteStrip pontosságát hivatalos alvás labor vizsgálatokban hitelesítették. A BiteStrip egy komplett mindent tartalmazó rendszer. Nincs szükség kiegészítő berendezésekre. Az eredmények a vizsgálatot követő reggelen a kijelzőről leolvashatók.

A BiteStrip működése

A páciens este felhelyezi az arcára a BiteStrip-et. A piros indikátor fény jelzi, hogy a készülék a helyén van és működik. Két maximális erejű fogszorítással beállítja az elektromiográfiás mérés küszöbértékét. A BiteStrip minden egyes szorítást számol, amely meghaladja a kalibráló két maximális szorítás átlagának 30%-át. A vizsgálat akkor ér véget, amikor a készüléket eltávolítjuk az arcról. Harminc perccel később a kijelző mutatja a vizsgálat alatt a fogszorítás súlyosságát

Forgalmazza:

S.L.P. Ltd.

18 Hazfira Street,

Tel-Aviv 67779, Israel

Tel: +972-3-5371281

Fax: +972-3-5371282

E-mail: slp.ltd@slp.co.il